Dosages (ou titrages) directs

Exercice 1 :dosage d'une solution de Tarnier par une solution de thiosulfate de sodium

Pour déterminer la concentration C_1 en diiode $I_{2(aq)}$ d'une solution de Tarnier, on dose un volume $V_1 = 25,0mL$ de solution de Tarnier par une solution de thiosulfate de sodium $(2Na^+_{(aq)} + S_2O_3^{2-}_{(aq)})$ de concentration $C_2 = 0,0200 mol/L$.

Données : $I_{2(aq)}/I^{-}_{(aq)}$ et $S_4O_6^{2-}_{(aq)}/S_2O_3^{2-}_{(aq)}$

Le volume versé à l'équivalence est égal à $V_{2E} = 12, 1mL$.

- 1. Etablir l'équation de la réaction de dosage.
- 2. Etablir un tableau d'avancement.
- 3. En déduire une relation entre $n(I_2)$ et $n(S_2O_3^{2-})$.
- 4. Déterminer la concentration C_1 du diiode.

Exercice 2 : Titrage conductimétrique


On dose, par titrage conductimétrique, une solution S_A d'acide chlorhydrique, $H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$, par une solution S_B d'hydroxyde de sodium, $Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$. L'équation de la réaction de titrage est :

$$H_3O^+_{(aq)} + HO_{(aq)} \longrightarrow 2 H_2O_{(l)}$$


Le suivi du titrage par conductimétrie permet de tracer le graphe $\sigma = f(V_B)$ ci-dessous :



- 2. Déterminer le volume équivalent V_E du titrage. néglige la dilution lors du titrage.
- 3. On se place avant l'équivalence.
- 3.1. Quel est le réactif limitant?
- 3.2. La concentration en ions chlorure varie-t-elle au cours du titrage?

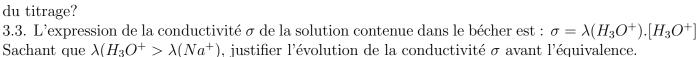


- 4. On se place maintenant après l'équivalence.
- 4.1. Quel est le réactif limitant?
- 4.2. Établir l'expression de la conductivité σ
- 4.3. Justifier l'évolution de la conductivité de la solution contenue dans le bécher après l'équivalence du titrage.

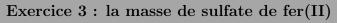

On pèse 1,0 g de sulfate de fer(II) impur. On le dissout dans un peu d'eau et on acidifie la solution à l'aide d'acide sulfurique et on ajoute la solution de permanganate.

La coloration rose persistante est obtenue lorsque nous avons ajouté 24,5 mL d'une solution de permanganate de potassium 0,025 mol/L.

Calculez la masse de sulfate de fer(II) dans 1,0 g de sulfate de fer impur.

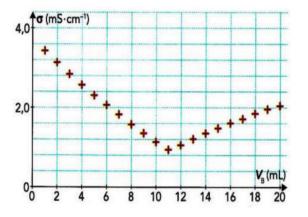

Exercice 4 : Vinaigre (acide acétique (CH_3COOH))

On désire par cet exercice déterminer la concentration molaire C_0 en acide acétique (CH_3COOH) du vinaigre du commerce, on prépare alors une solution diluée 100 fois de concentration C_A .

Ensuite, on prélève un volume $V_A = 10,0mL$ de cette solution diluée que l'on dose par une solution d'hydroxyde de sodium $(Na^+ + HO^-)$ de concentration $C_B = 10.10^{-3} mol.L^{-1}$.

Le volume de réactif titrant (hydroxyde de sodium) versé à l'équivalence vaut $V_{BE} = 9,7mL$.

- 1. Identifier les deux couples acido-basiques mis en jeu dans ce titrage et écrire l'équation de la réaction.
- 2. Expliquer à quoi correspond l'équivalence.
- 3. Le titrage est suivi par une mesure de la conductivité de la solution dosée.
- 3.1. Expliquer pourquoi la conductivité augmente doucement du début du titrage jusqu'à l'équivalence.
- 3.2. Expliquer pourquoi la conductivité augmente fortement après l'équivalence.
- 4. En utilisant un tableau d'avancement simplifié, trouver la relation entre la quantité de matière d'acide acétique titrée n_A et la quantité de matière d'hydroxyde de sodium versé n_B à l'équivalence ?
- 5. Calculer la concentration en acide acétique C_A de la solution de vinaigre diluée.
- 6. En déduire la concentration C_0 en acide acétique du vinaigre commercial.

Exercices Supplémentaires

Exercice 5 :dosage du permanganate de potassium

On prépare une solution S_1 de permanganate de potassium $(K_{(aq)}^+ + MnO_{4(aq)}^-)$ de coloration violette en dissolvant une masse m de $KMnO_{4(s)}$ dans un volume V = 100mL d'eau, (acidifiée par quelques gouttes d'acide sulfurique).

Pour déterminer la concentration de la solution S_1 , on prélève à l'aide d'une pipette un volume $V_1 = 10mL$ de cette solution qu'on introduit dans un bécher et on lui ajoute progressivement une solution S_2 d'acide oxalique $H_2C_2O_4$ de concentration $C_2 = 0, 4mol/L$.

- 1. Comment s'appelle cette étude expérimentale qui a pour objet la détermination de la concentration de la solution S_1 ?
- 2. Donner le schéma du dispositif expérimental utilisé dans cette étude en nommant ses différents constituants.
- 3. Comment s'appelle la solution dont on doit déterminer la concentration ? et comment s'appelle la solution ajouté?
- 4. Ecrire l'équation de la réaction qui se produit durant cette étude sachant que: l'acide oxalique est réducteur du couple $CO_2/H_2C_2O_4$ et l' ion permanganate est oxydant du couple MnO_4^-/Mn^{2+} .
- 5. Construire le tableau d'avancement de cette réaction et en déduire la relation d'équivalence.
- 6. Comment repérer l'équivalence dans cette étude?
- 7. Quel est le réactif limitant avant l'équivalence et quel est celui limitant après l'équivalence?
- 8. Sachant que le volume ajouté à l'équivalence est : $V_{2eq} = 12, 5mL$, déterminer la concentration C_1 de la solution S_1 .
- 9. Déterminer la masse m utilisée pour préparer la solution S_1 .
- 10. Pour diluer la solution S_1 , quel volume d'eau doit- on ajouter à 90mL de la solution S_1 pour que sa concentration devient C' = 0.1 mol/L?
- on donne : g=10N/kg M(K)=39,1g/mol M(Mn)=54,9g/mol M(O)=16g/mol